


Poinçons osseux SQ.line® KERRISON

So Clean!


1 | Démontage



1 Fermez la poignée avant.

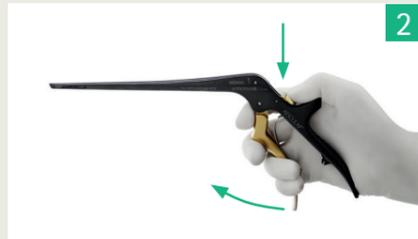

2 Appuyez complètement sur le loquet doré et relâchez la poignée.

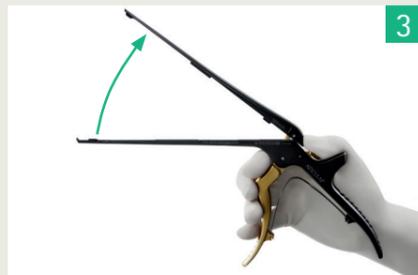

3 Ouvrez le glisseur.

2 | Nettoyage



Placez les poinçons en position ouverte dans le plateau pour le nettoyage.



Vous pouvez également placer les poinçons dans le rack SQ.line® KERRISON pour le nettoyage (Ref. JF125R ou Ref. JF126R).

3 | Maintenance



Les parties mobiles (charnières, loquets et zone de contact de la pièce glissante) doivent être lubrifiées avec une huile légère stérilisable et perméable à l'humidité, telle que l'huile d'entretien Sterilit® (Ref. JG598 ou Ref. JG600).



4 | Assemblage



1 Fermez le slider.



2 Fermez et relâchez la poignée frontale.



3 Le loquet doré se fermera de lui-même.

5 | Contrôle des fonctions



Vérifiez que les poinçons fonctionnent correctement.

Veillez contacter le service technique Aesculap pour plus d'informations.

☎ Téléphone +49 7461 95-1602

✉ repair.instruments@aesculap.de

6 | Stockage



Stockez les poinçons en position fermée sur le plateau ou dans le rack SQ.line® KERRISON (Ref. JF125R ou Ref. JF126R).

7 | Stérilisation



Pour plus d'informations, veuillez consulter nos brochures :

- C72902 SQ.line® KERRISON
- C84802 Entretien correct des instruments
- C63402 Aesculap InOS® – Système d'organisation des instruments
Procédure de retraitement validée



Veillez tenir compte des instructions d'utilisation (TA018250).

<https://eifu.bbraun.com/eifu/TA018250>