



UREOFIX® 500 CLASSIC

2 geïntegreerde bevestigingssystemen


UREOFIX® 500 CLASSIC BEVAT 2 BEVESTIGINGSSYSTEMEN:

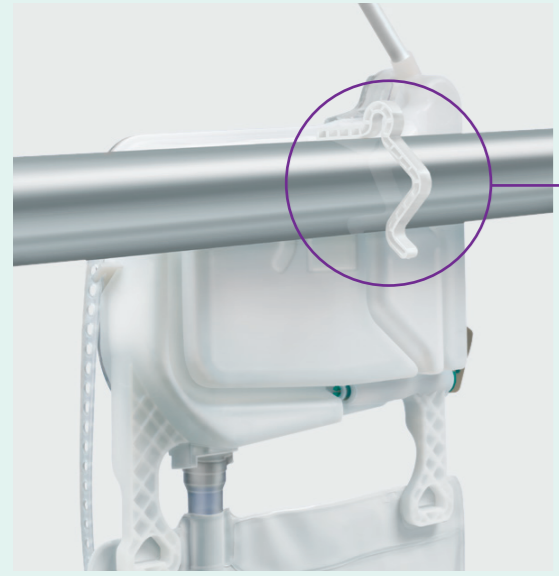

1. Geïntegreerde afneembare haak, voormonteerd aan de achterzijde van het reservoir.

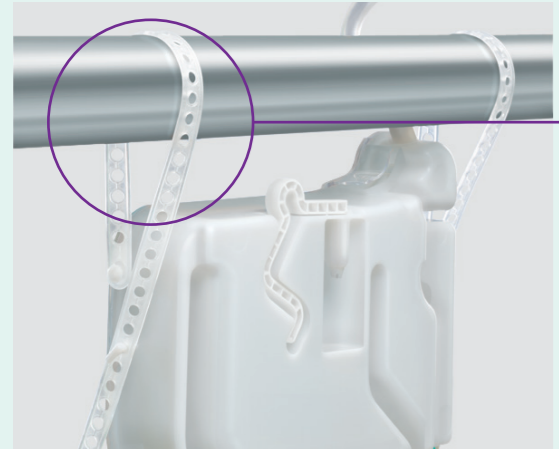

2. Twee voormonteerde bevestigingsbanden op het reservoir.

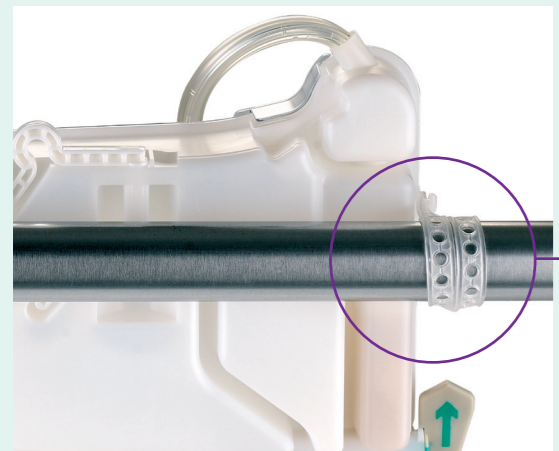

Productbeschrijving en referenties

	Lengte slang	Eenheden/ doos	Referentie
UREOFIX® 500 CLASSIC SET MET GESLOTEN ZAK			
Ureofix® 500 Classic met wisselzak 1,5 L	120	10	4417910
	170	10	4417920
UREOFIX® 500 CLASSIC SET MET LEDIGBARE ZAK			
Ureofix® 500 Classic met gemonteerde ledigbare zak 2 L	120	10	4417930
	170	10	4417940
	Inhoud zak	Eenheden/ doos	Referentie
UREOFIX® 500 CLASSIC WISSELZAKKEN			
Ureofix® 500 gesloten zak	1,5 L	100	4417535
	3,5 L	100	4417543
Ureofix® 500 ledigbare zak	2 L	100	4417551



UREOFIX® 500 CLASSIC

URINEMEESTEMEN

B. Braun Medical N.V. | Lambroekstraat 5b | 1831 Diegem | België
+32 (0)2 712 86 50 | customercare.be@bbraun.com | www.bbraun.be

De informatie in deze communicatie is strikt vertrouwelijk, kan bedrijfsinformatie omvatten en is alleen bedoeld voor gebruik door de geadresseerde. Het is eigendom van de afzender van deze informatie. Ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of kopiëren van deze communicatie of een deel daarvan is ten strengste verboden en kan onwettig zijn.

V-09/2020

UREOFIX® 500 CLASSIC

Veilige staalafname

Ureofix® 500 classic is gebaseerd op nieuwe technologie en garandeert veiligheid en comfort voor het zorgpersoneel en de patiënten:


- Minder kans op infecties
- Veilige procedure voor staalafname zonder naald
- Reservoir kan snel worden geleidigd
- Nauwkeurige observatie

**DEHP FREE
LATEX FREE**





Ureofix® 500 Classic - 2 L

Minder risico op infecties

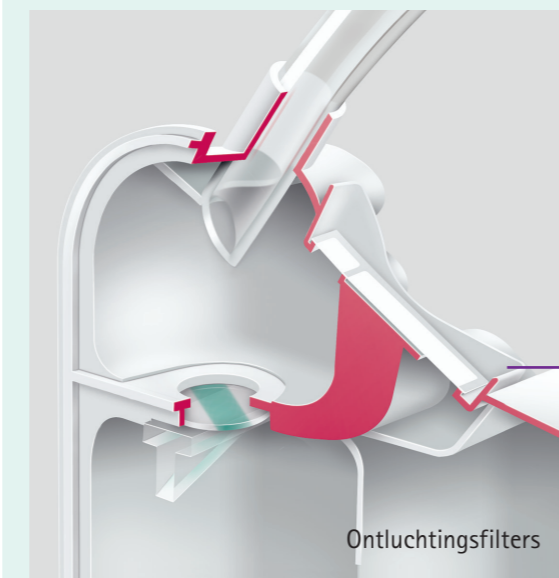

DRUPPELKAMER

- Voorkomt retrograde beweging van bacteriën en vermindert daarmee het risico op bacteriële infecties
- Geïntegreerde anti-refluxklep voorkomt terugstromen van de urine in de slang
- Gebalanceerde druk door de ontluuchtingsfilters

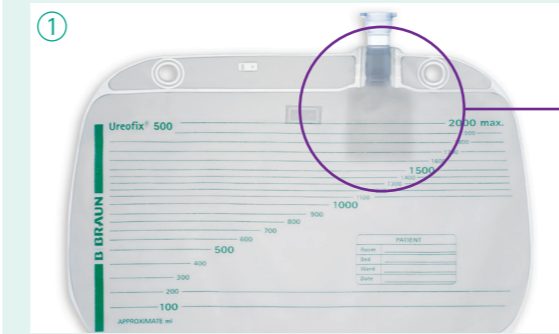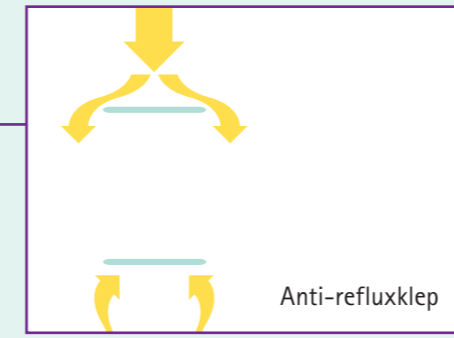

ZAK MET ANTI-REFLUXKLEP EN LUCHTFILTER



NAALDVRIJE POORT VOOR STAALAFNAME


Kan tot 30 maal gebruikt worden voor meer veiligheid.




OPKLAPBARE AFTAP

Om contact met de grond te vermijden.

Snelle lediging van het reservoir en nauwkeurig meetbereik

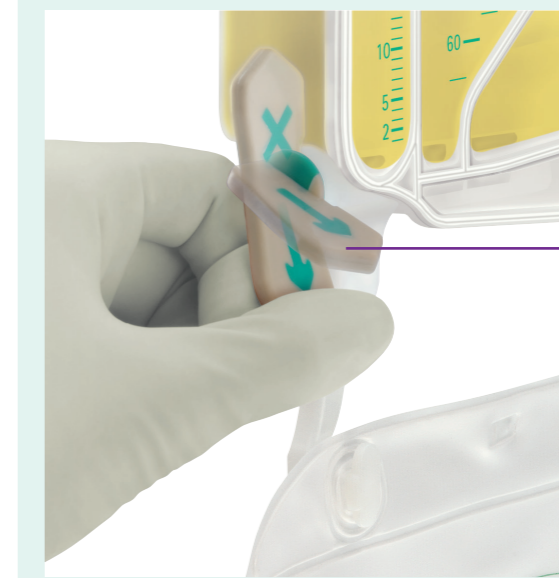


POSITIEAANWIJZINGEN VAN DE OPENING EN DE SLUITING

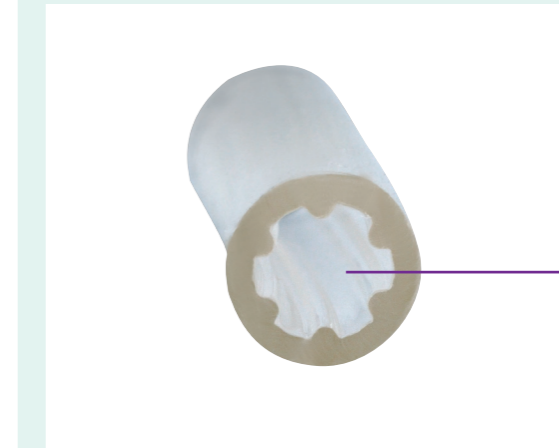

GROEVEN IN AFVOERSLANG

De groeven in afvoerslang zorgen voor een versnelde afloop van de urine.

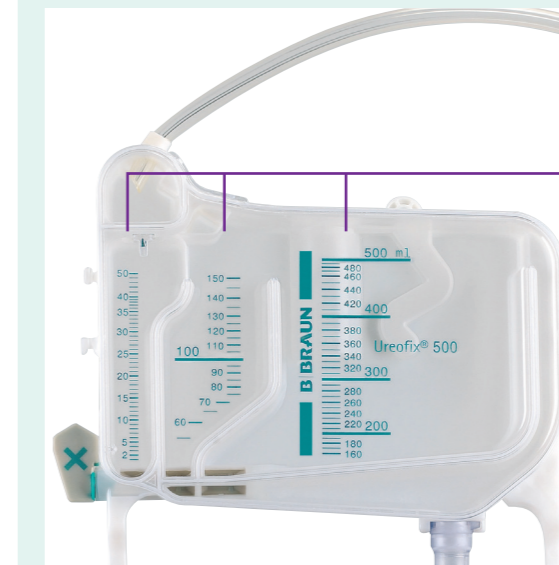

NAUWKEURIGE METING VAN HET URINEVOLUME

Dankzij het harde reservoir met drie compartimenten.